

Informe de Placa de Tórax

Información de la Paciente y del Proveedor

NOMBRE DE LA PACIENTE:

test

ID DE LA PACIENTE:

test

ID DE quantusTX:

btech-32

CLÍNICA:

Transmural Biotech


MÉDICO SOLICITANTE:

Juan Rodriguez

FECHA DEL INFORME: (dd/mm/yyyy)

19/02/2026

Información de la muestra

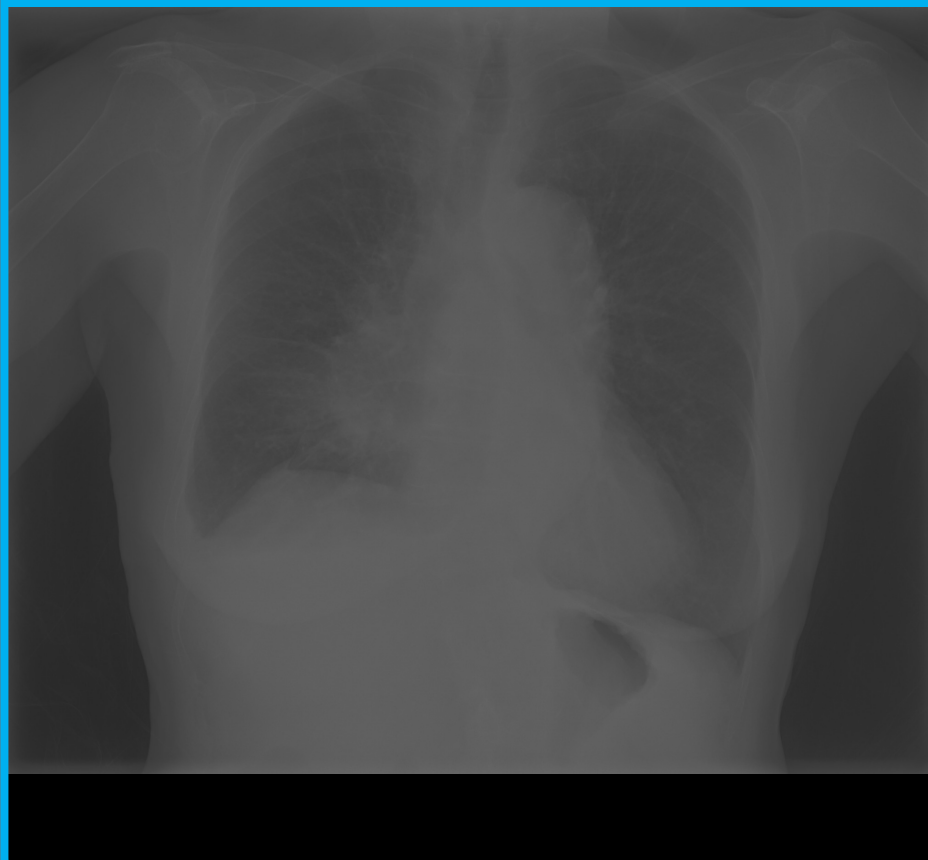

Resultado del Test quantusTX

Riesgo Atelectasia:

56.03%

0% 25% 50% 75% 100%

Riesgo Consolidación:

64.04%

0% 25% 50% 75% 100%

Riesgo Neumotórax:

54.48%

0% 25% 50% 75% 100%

Riesgo Efusión:

96.23%

0% 25% 50% 75% 100%

FECHA ADQUISICIÓN X-RAY:
(dd/mm/yyyy)

22/09/2022 16:55:31

FECHA ANALISIS:
(dd/mm/yyyy hh:mm)

19/02/2026 12:23

Consideraciones clínicas

quantusTX™ está entrenado con imágenes RX de vista AP de tórax. La inclusión en el análisis de otras vistas podría afectar el resultado, por lo que no debería tenerse en consideración. Consulte la guía de adquisición para más detalle.

	UMBRAL DE RIESGO	SENS	SPEC	VPP	VPN
Atelectasia	33.5%	86.5%	71.5%	75.1%	84.4%
Consolidación	40.7%	89.1%	80.8%	81.3%	88.8%
Neumotórax	39.8%	87.2%	80.3%	81.4%	86.4%
Efusión	63.7%	93%	89.5%	90.8%	92%

Umbral del Riesgo: Umbral de positividad del porcentaje de riesgo en el que se dan los valores de SENS, SPEC, ... indicados.

Sens: Sensibilidad Spec: Especificidad
VPP: Valor predictivo positivo VPN: Valor predictivo negativo

DESCRIPCION DEL TEST

quantusTX ofrece una valoración automática del riesgo de atelectasia, consolidación, neumotórax o efusión a partir del análisis cuantitativo de las texturas de una imagen de RX anteroposterior de tórax. La calidad de la imagen y la adquisición son relevantes y se deben obtener considerando los requisitos del producto. En caso de duda o consulta sobre este informe puede ponerse en contacto con TRANSMURAL BIOTECH a través de la dirección de email support@quantustx.org

quantusTX™ es un producto sanitario que cumple con la legislación vigente. Se considera quantusTX™ únicamente para el uso en investigación clínica y no para el uso clínico. quantusTX™ ha sido desarrollado por Transmural Biotech, B65084675, C/Juan Ignacio Luca de Tena 12, 28027 Madrid España. En virtud del Reglamento (UE) 2016/769 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que Transmural Biotech es el encargado de tratamiento de sus datos con el fin de ofrecerle el tratamiento sanitario. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Transmural Biotech SL, en la dirección de correo electrónico dpo@transmuralbiotech.com

Autorizado por



Autorizado por:
Transmural Biotech S.L.